

Accu-Chek Aviva Connect. Le lecteur de glycémie relié.



Écran

Touche de défilement vers le haut et vers le bas

Touche OK

Touche Retour

Fente d'insertion de la bandelette réactive

Retrouvez plus d'informations sur la manipulation en vidéo à l'adresse: www.accu-chek.de/connect ou sur la notice d'utilisation.

Effectuer une mesure de glycémie



Introduire la bandelette réactive

Introduisez la bandelette réactive dans le lecteur en suivant le sens de la flèche, le lecteur de glycémie s'allume alors. Le message *Messung wird vorbereitet* (Préparation de la mesure en cours) apparaît sur l'écran.



Appliquer le sang

Mettez la goutte de sang en contact avec l'extrémité de la bandelette réactive. N'appliquez pas le sang sur le bord supérieur de la bandelette réactive. Une fois qu'une quantité suffisante de sang a été appliquée sur la bandelette réactive, le message *Messung wird durchgeführt* (Mesure en cours) apparaît à l'écran.



Prélever le sang

Lorsque le message *Tropfen auftragen* (Appliquer goutte) apparaît à l'écran, prélevez une goutte de sang sur la pulpe du doigt à l'aide de l'autopiqueur (voir l'aide-mémoire au verso).



Marquer un résultat

Le résultat s'affiche dans la moitié supérieure de l'écran. Appuyez sur la touche OK pour ajouter un marquage au résultat: *Markierung* (Marquage) apparaît alors à l'écran. Appuyez sur la touche de défilement vers le haut et vers le bas pour sélectionner le marquage souhaité et confirmez en appuyant sur la touche OK.

Si vous le souhaitez, les données sont ensuite transmises à l'application Accu-Chek Connect sur votre smartphone.

ACCU-CHEK®

Accu-Chek FastClix.


Le prélèvement sanguin en un seul clic.

Préparation



Réglez la profondeur de piqûre

Tournez l'embout jusqu'à ce que la profondeur de piqûre souhaitée se trouve en face de la marque

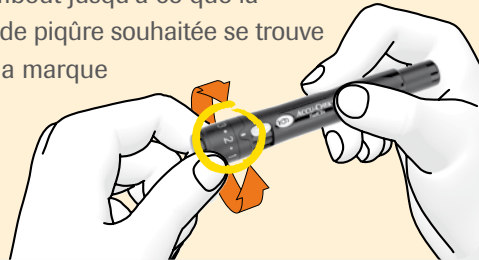


Le prélèvement sanguin en un seul clic!

Prélever le sang

Enfoncez le bouton de déclenchement jusqu'en butée



Un seul clic pour armer et déclencher

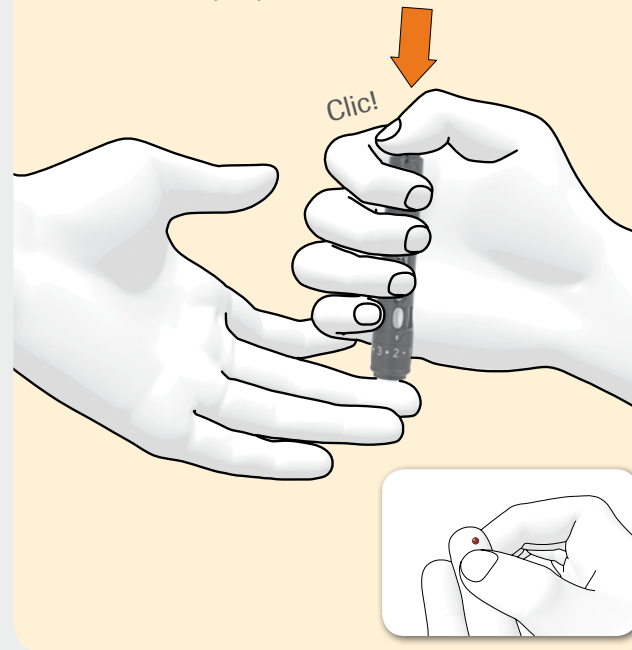

Entretien



Positionner une nouvelle lancette

Poussez le bouton-poussoir jusqu'en butée côté A puis repoussez-le vers B

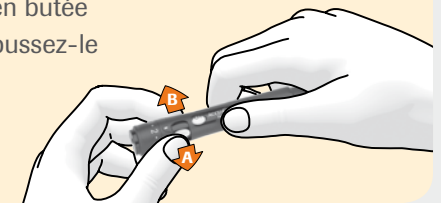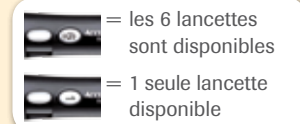

Retirer la cartouche de lancettes usagée

Retirez l'embout et sortez la cartouche

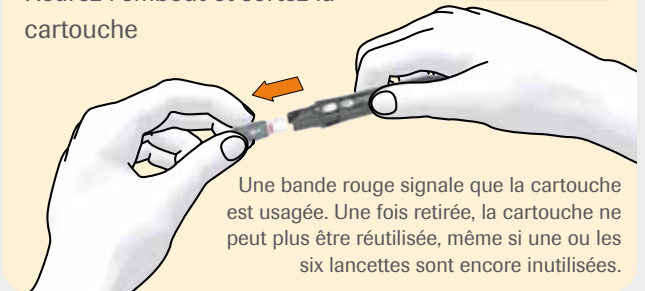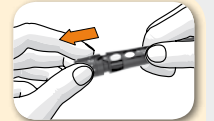

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT, ACCU-CHEK CONNECT et FASTCLIX sont des marques de Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Tous droits réservés.

Vous souhaitez en savoir plus?

Nos collaborateurs du service Client Accu-Chek sont là pour vous!
Numéro gratuit 0800 4466800 (du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00).
Ou rendez-vous sur notre site Internet www.accu-chek.de



www.accu-chek.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK®