

Accu-Chek Aviva Connect. El glucómetro que conecta.



Encontrará más información acerca del uso del dispositivo en el vídeo del producto: www.accu-chek.de/connect y en el folleto incluido en la caja.

Cómo realizar una medición de glucemia



Introducir la tira reactiva

Introduzca la tira reactiva en el medidor siguiendo la dirección de la flecha, el medidor se conectará. En la pantalla aparecerá *Messung wird vorbereitet* (Preparando la medición).



Extraer sangre

Cuando en la pantalla aparezca *Tropfen auftragen* (Aplicar gota), obtenga una gota de sangre pinchando con el dispositivo de punción en una de las superficies laterales de la yema del dedo (breve explicación al dorso).



Aplicar la sangre

Roce el extremo de la tira reactiva con la gota de sangre. No aplique la gota de sangre encima de la tira reactiva. En cuanto se haya absorbido la cantidad suficiente de sangre en la tira reactiva, aparecerá en la pantalla *Messung wird durchgeführt* (Analizando).



Marcar el valor de medición

El valor de medición aparecer en la mitad superior de la pantalla. Para añadir una marca al valor de medición, pulse OK y aparecerá *Markierung* (Marca) en la pantalla. Para seleccionar la marca que desea usar, pulse la tecla para subir y bajar y confirme con OK.

Si lo desea, a continuación, puede transferir los datos a la aplicación Accu-Chek Connect de su teléfono inteligente.

ACCU-CHEK®


Accu-Chek FastClix.

Extracción de sangre con sólo 1 clic.

Preparación

Colocar un cartucho de lancetas

Quitar el capuchón

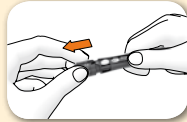

Introducir el cartucho



Colocar el capuchón



Ajustar la profundidad de penetración

Gire el capuchón hasta que en la marca aparezca la profundidad de penetración deseada




Extracción de sangre: simplemente con 1 clic.

Extraer sangre

Apriete el botón disparador completamente hacia abajo



Sólo 1 clic para tensar y disparar

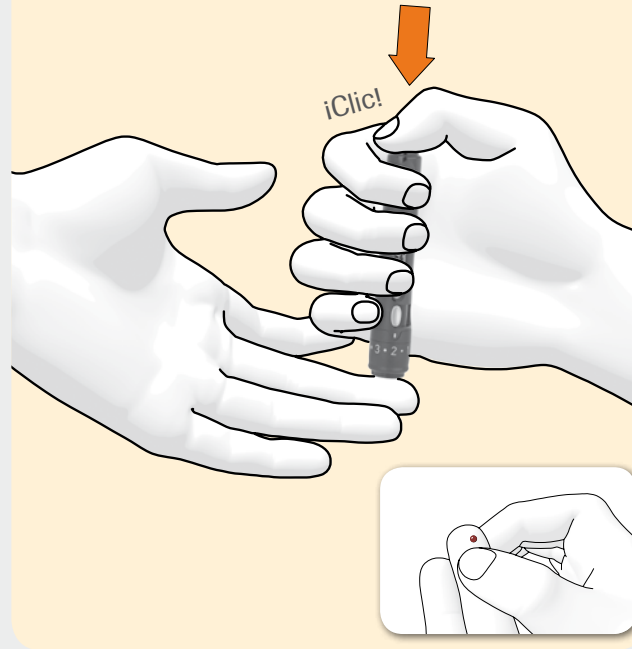

Preparación para volver a utilizarlo



Cargar una nueva lanceta

Gire el botón de resorte hasta el tope hacia A y después hacia B

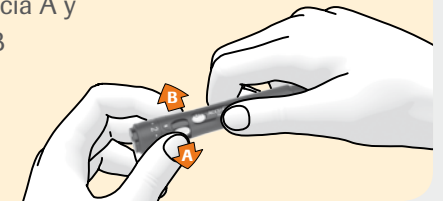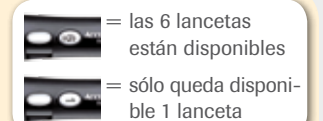

Retirar el cartucho de lancetas usado

Quite el capuchón y saque el cartucho

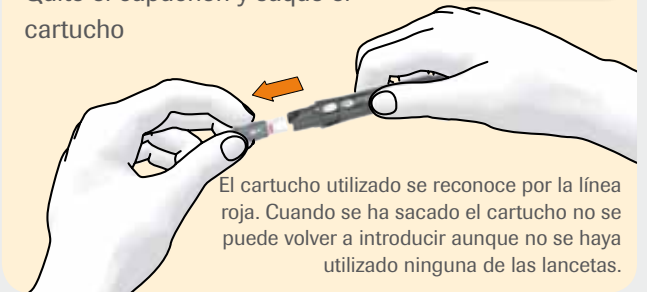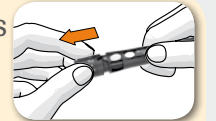

El cartucho utilizado se reconoce por la línea roja. Cuando se ha sacado el cartucho no se puede volver a introducir aunque no se haya utilizado ninguna de las lancetas.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT, ACCU-CHEK CONNECT y FASTCLIX son marcas de Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Todos los derechos reservados.

¿Quiere saber más?

¡Nuestros empleados del Centro de Atención al Cliente de Accu-Chek están a su disposición!

Número de teléfono gratuito 0800 4466800 (Lu-Vi, 08:00-18:00 h).

O visite nuestro portal online en www.accu-chek.de



www.accu-chek.de

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK®