

# Accu-Chek Aviva Connect. Bağlantı kurabilen kan şekeri ölçüm aleti.



Ekran

Yukarı ve aşağı tuşu

OK tuşu

Geri tuşu

Test cubuğun yeri

Diğer kullanım talimatlarını  
[www.accu-chek.de/connect](http://www.accu-chek.de/connect) üzerinden ürün videosu  
veya ambalajda bulunan broşür sunmaktadır.

## Kan şekerinin ölçülmesi



## Test çubuğunun yerleştirilmesi

Test şeridini ok işareti yönünde ölçüm aletine yerleştirin; ölçüm aleti çalışmaya başlar. Ekranda *Messung wird vorbereitet* (Ölçüm hazırlanıyor) mesajı belirir.



## Kanın test çubuğuna uygulanması

Test şeridinin ucuyla kan damlasına dokununuz. Kanı test şeridinin üst tarafına sürmeyin. Test şeridine yeterli miktarda kan geçtikten sonra ekranda *Messung wird durchgeführt* (Ölçüm yapılıyor) mesajı belirir.



## Kan alınması

Ekranda *Tropfen auftragen* (Kan damlasını sür) mesajı belirindiğinde, iğne kalemini batırarak parmağınızın yan ucundan bir damla kan çıkmasını sağlayın (kısa kılavuz arka sayfadadır).



## Ölçüm değerinin işaretlenmesi

Ölçüm değeri ekranın üst yarısında belirir. Ölçüm değerini işaretlemek için OK tuşuna basın: Ekranda *Markierung* (İşaretle) yazısı belirir. Yukarı ve aşağı tuşlarını istediğiniz işareti seçin ve OK ile onaylayın.

Eğer isterseniz veriler ardından akıllı telefonunuzdaki Accu-Chek Connect App uygulamasına aktarılır.

**ACCUCHEK®**

# Accu-Chek FastClix.


## Kan alımı için yalnızca bir klik.

### Hazırlık

Lanset  
tamburunun  
yerleştirilmesi



Kapağı  
çıkartın

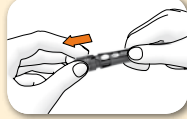

Tamburu  
yerleştirin




Kapağı  
takın



Delme derinliğinin ayarlanması

İstenilen delme derinliği işarete gelinceye  
kadar kapağı çevirin

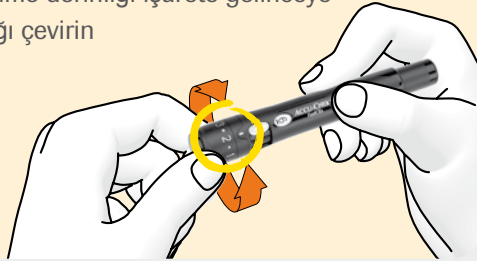


### Kan alımı: yalnızca tek 1 klik!

Kan alınması

Bastırma düğmesini tamamen  
aşağıya bastırın


Germek ve  
bastırmak için  
yalnızca 1 klik

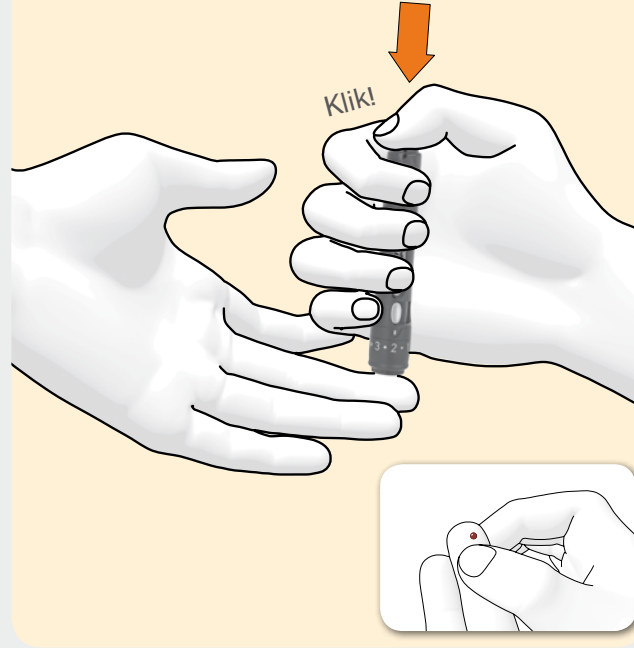

### Kan alımı sonrası işlem


Yeni bir lansetin hazır  
bulundurulması

Kaldırıcı sonuna kadar A  
yönüne ve tekrar B yönüne  
hareket ettirin

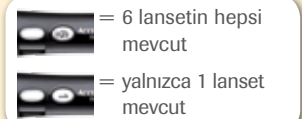



= 6 lansetin hepsi  
mevcut

= yalnızca 1 lanset  
mevcut

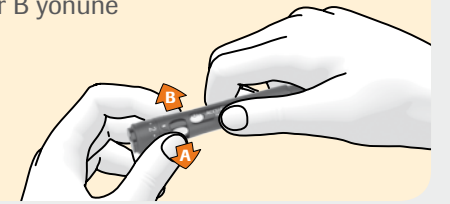

Kullanılmış lanset  
tamburunun çıkartılması

Kapağı çıkartın ve tamburu  
çekerek çıkartın

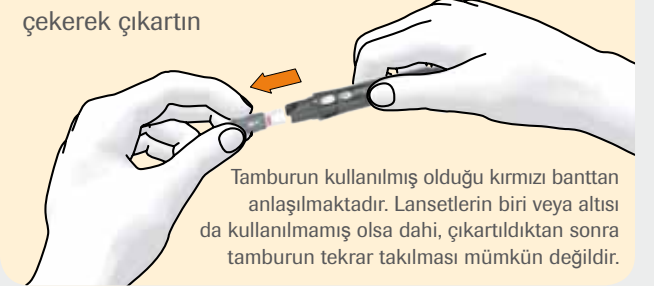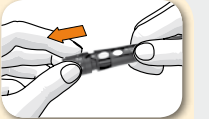

Tamburun kullanılmış olduğu kırmızı banttan  
anlaşılmaktadır. Lansetlerin biri veya altısı  
da kullanılmamış olsa dahi, çıkartıldıktan sonra  
tamburun tekrar takılması mümkün değildir.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT, ACCU-CHEK CONNECT ve FASTCLIX Roche'un markalarıdır.  
© 2016 Roche Diabetes Care. Tüm haklar saklıdır.

### Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?

Accu-Chek Müşteri Servisi Merkezindeki görevlilerimiz sizin hizmetinizdedir!  
**Ücretsiz telefon numarası 0800 4466800** (Pa.-Cu., saat 08:00-18:00).  
Veya [www.accu-chek.de](http://www.accu-chek.de) online portalımızı ziyaret edin.



[www.accu-chek.de](http://www.accu-chek.de)

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH  
Sandhofer Straße 116  
68305 Mannheim

**ACCU-CHEK®**