

Accu-Chek Aviva.

الأمان إحساس طيب.



المزيد من إرشادات الاستخدام تحصلون عليها من فيديو المنتج تحت العنوان
www.accu-chek.de/aviva أو من نشرة العبوة.

إجراء قياس السكر بالدم



1 إدخال شريحة الاختبار

أدخل شريحة الاختبار في اتجاه السهم في جهاز القياس حتى تصدر إشارة صوتية. يظهر رمز قطرة دم وماض.



2 أخذ الدم

احصل على قطرة دم بمساعدة أداة الوخز من جانب الأصبع (لدليل الاستخدام المختصر على ظهر الصفحة).



3 وضع الدم

مس قطرة الدم بنهاية شريحة الاختبار. لا تضع الدم على السطح العلوي لشريحة الاختبار. وبمجرد أن تصدر إشارة صوتية وتبدأ الساعة الرملية في الوميض، يكون قد تم امتصاص دم كافي من شريحة الاختبار.



4 قراءة القيم المقاسة

بعد 5 ثواني ستظهر القيمة المقاسة على الشاشة. ويتم إيقاف جهاز القياس بشكل تلقائي بمجرد إخراج شريحة الاختبار.

Accu-Chek FastClix.


نقرة واحدة فقط للحصول على الدم.

الإعداد



اضبط عمق الوخزة


قم بتدوير الغطاء، حتى يقع عمق الوخزة المرغوب على العلامة

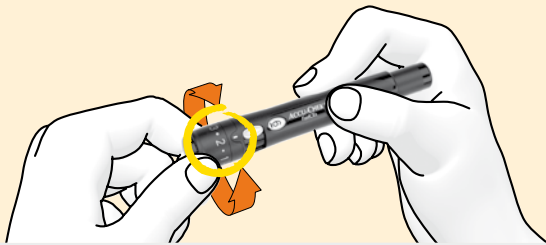

الحصول على الدم: بنقرة واحدة فقط!



أخذ الدم
انضغط زر التحرير بالكامل إلى أسفل

نقرة واحدة فقط للتركيب والتحرير


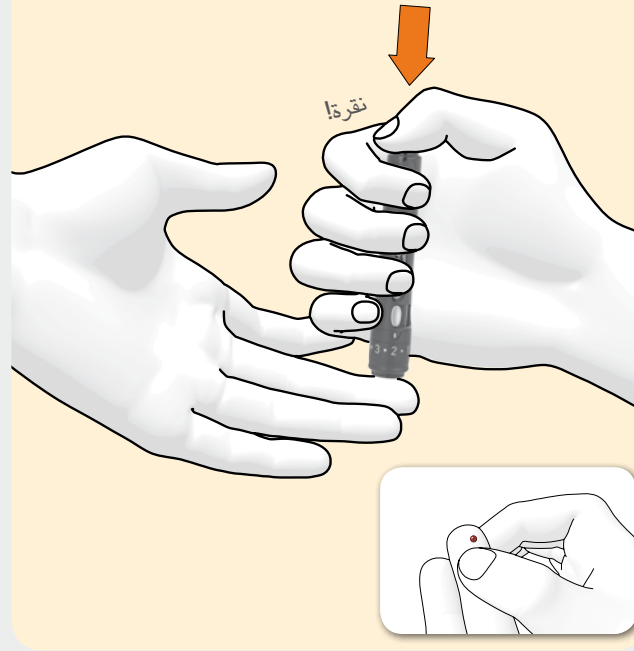


الإعداد اللاحق

تجهيز أداة وخز جديدة
حرك الزر الراجع حتى النهاية في اتجاه A
ثم حركه مرة أخرى في اتجاه B

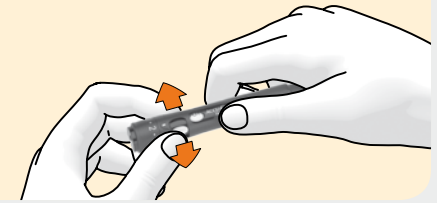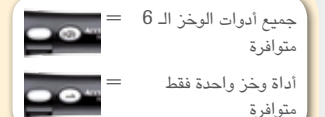

انزع أسطوانة أداة الوخز المستعملة
انزع الغطاء وأخرج الاسطوانة

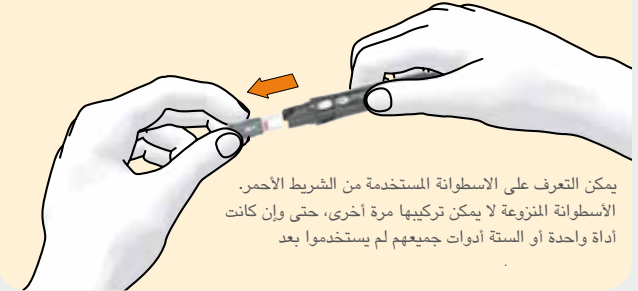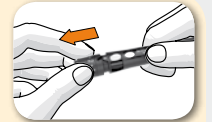

إن ACCU-CHEK و ACCU-CHEK AVIVA و FASTCLIX علامات تجارية مملوكة لشركة Roche. حقوق الطبع محفوظة لـ Roche Diabetes Care 2016 جميع الحقوق محفوظة.

www.accu-chek.de

شركة Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim



هل تريد معرفة المزيد؟

العاملون لدينا في مركز خدمة عملاء Accu-Chek في خدمتكم!

هاتف مجاني 0800 4466800 (الأثنين - الجمعة، الساعة 08:00 - 18:00).

أو زوروا موقعنا على الإنترنت تحت العنوان www.accu-chek.de

ACCU-CHEK®