

Accu-Chek Aviva. La sécurité au bout des doigts.



Retrouvez plus d'informations sur la manipulation en vidéo à l'adresse: www.accu-chek.de/aviva ou sur la notice d'utilisation.

Effectuer une mesure de glycémie



Introduire la bandelette réactive

Introduisez la bandelette réactive dans le lecteur en suivant le sens de la flèche jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Un symbole représentant une goutte de sang clignote.



Appliquer le sang

Mettez la goutte de sang en contact avec l'extrémité de la bandelette réactive. N'appliquez pas le sang sur le bord supérieur de la bandelette réactive. Le signal sonore et le clignotement de l'icône en forme de sablier vous indiquent que la quantité de sang prélevée est suffisante.



Prélever le sang

A l'aide d'un autopiqueur, prélevez une goutte de sang sur la pulpe du doigt (voir l'aide-mémoire au verso).



Lire le résultat

Après 5 secondes, l'écran affiche le résultat. Le lecteur s'éteint automatiquement après le retrait de la bandelette réactive.

Accu-Chek FastClix.

Le prélèvement sanguin en un seul clic.

Préparation

Insérer la cartouche de lancettes


Retirez l'embout

Introduisez la cartouche

Remettez l'embout

Réglez la profondeur de piqûre

Tournez l'embout jusqu'à ce que la profondeur de piqûre souhaitée se trouve en face de la marque

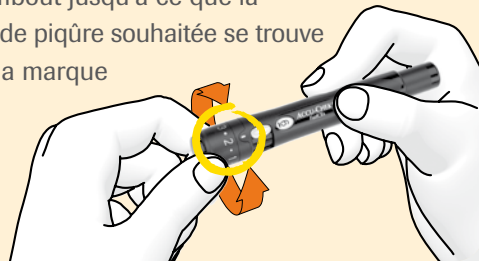


Le prélèvement sanguin en un seul clic!

Prélever le sang

Enfoncez le bouton de déclenchement jusqu'en butée



Un seul clic pour armer et déclencher

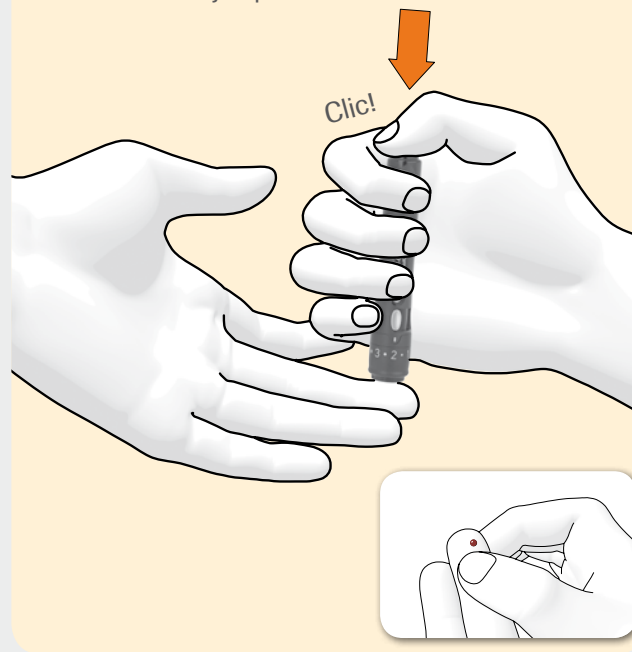

Entretien



Positionner une nouvelle lancette

Poussez le bouton-poussoir jusqu'en butée côté A puis repoussez-le vers B

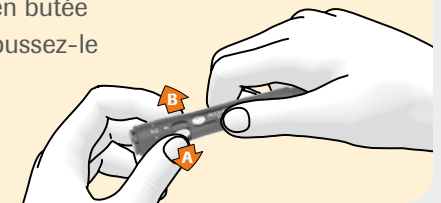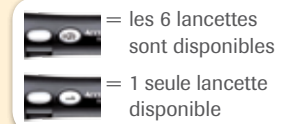

Retirer la cartouche de lancettes usagée

Retirez l'embout et sortez la cartouche

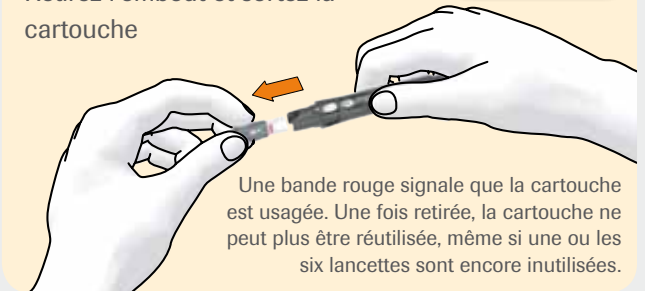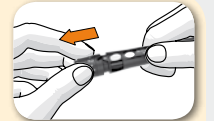

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA et FASTCLIX sont des marques de Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Tous droits réservés.

Vous souhaitez en savoir plus?

Nos collaborateurs du service Client Accu-Chek sont là pour vous!
Numéro gratuit 0800 4466800 (du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00).
Ou rendez-vous sur notre site Internet www.accu-chek.de



www.accu-chek.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK®