

Accu-Chek Aviva. Η καλή αίσθηση της ασφάλειας.



Άλλες υποδείξεις χειρισμού παρέχονται στο βίντεο του προϊόντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.accu-chek.de/aviva ή στο ένθετο της συσκευασίας.

Διεξαγωγή μέτρησης γλυκόζης αίματος



Εισαγωγή της ταινίας μέτρησης

Εισάγετε την ταινία μέτρησης στην κατεύθυνση του βέλους μέσα στο μετρητή, μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. εμφανίζεται το σύμβολο σταγόνας αίματος που αναβοσβήνει.



Τοποθέτηση δείγματος αίματος

Αγγίξτε με το άκρο της ταινίας μέτρησης τη σταγόνα αίματος. Μην τοποθετείτε αίμα στο επάνω μέρος της ταινίας μέτρησης. Όταν ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και η κλεψύδρα αρχίζει να αναβοσβήνει, έχει αντληθεί επαρκής ποσότητα αίματος στην ταινία μέτρησης.



Λήψη αίματος

Λάβετε μια σταγόνα αίματος από την πλευρά του δακτύλου σας με τη βοήθεια του στυλό λήψης αίματος (πίσω πλευρά των συνοπτικών οδηγιών χρήσης).



Ανάγνωση της τιμής μέτρησης

Μετά από 5 δευτερόλεπτα, η τιμή μέτρησης εμφανίζεται στην οθόνη. Ο μετρητής τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας, όταν αφαιρεθούν οι ταινίες μέτρησης.

Accu-Chek FastClix. Μόνο 1 κλικ για τη λήψη αίματος.

Προετοιμασία

Τοποθέτηση του τυμπάνου βελονών


Αφαιρέστε το καπάκι

Εισάγετε το τύμπανο

Τοποθετήστε το καπάκι

Ρύθμιση του βάθους τρυπήματος

Στρίψτε το καπάκι, μέχρι να φθάσει στην ένδειξη του επιθυμητού βάθους τρυπήματος

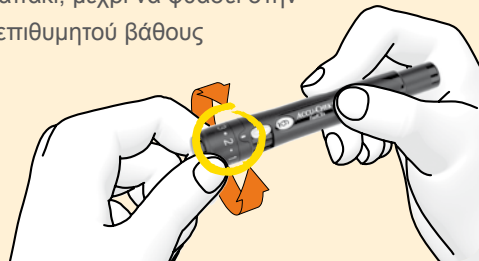

Λήψη αίματος: μόνο με 1 κλικ!

Λήψη αίματος

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης προς τα κάτω μέχρι το τέρμα


Μόνο 1 κλικ για όπλιση και απελευθέρωση



Παρακολούθηση

Παροχή νέας βελόνας

Μετακινήστε το μοχλό μέχρι το τέρμα προς την κατεύθυνση A και ξανά προς την κατεύθυνση B

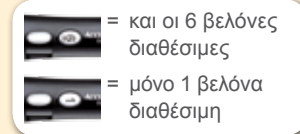

Αφαίρεση του χρησιμοποιημένου τυμπάνου βελονών

Αφαιρέστε το καπάκι και τραβήξτε το τύμπανο προς τα έξω



Το χρησιμοποιημένο τύμπανο αναγνωρίζεται από την κόκκινη ταινία. Αφού αφαιρεθεί, δεν μπορεί να επανατοποθετηθεί, ακόμα και αν μία ή και οι έξι βελόνες παραμένουν αχρησιμοποίητες.

Τα ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA και FASTCLIX είναι εμπορικά σήματα της Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Οι εργαζόμενοί μας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Accu-Chek είναι εδώ για σας!
Αριθμός τηλεφώνου χωρίς χρέωση 0800 4466800 (Δευτέρα–Παρασκευή, 08:00–18:00).
Ή επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο μας στο www.accu-chek.de



www.accu-chek.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK®