

Accu-Chek Aviva. Tako je dobro osjećati se sigurno.



Dodatne naputke za rukovanje možete naći na videozapisu o proizvodu pod www.accu-chek.de/aviva ili u uputama priloženim ambalaži.

Mjerenje šećera u krvi



Uvođenje test trake

Test traku u smjeru strelice uvlačite u mjerni uređaj dok se ne oglasi signalni ton. Javlja se treptajući simbol u vidu kapi krvi.



Vađenje krvi

Priborom za ubadanje ubodite bočnu stranu prsta kako bi se formirala jedna kap krvi (kratke upute na poleđini ovog lista).



Nanošenje krvi

Krajem test trake dotaknite kap krvi. Krv nemojte nanositi na gornju stranu test trake. Čim se začuje signalni ton i pješčani sat počne treptati, to je znak kako je test traka apsorbirala dostatno krvi.



Očitavanje izmjerene vrijednosti

Na zaslonu se nakon 5 sekundi pojavljuje izmjerena vrijednost. Aparat za mjerenje šećera će se automatski isključiti, kada test traka biće izvađena.

Accu-Chek FastClix.

Samo 1 klik i krv je spremna za analizu.

Priprema za mjerenje



Namještanje dubine uboda

Okrećite poklopac dok se na pokazivaču ne pojavi željena dubina uboda




Vađenje krvi: jednostavno samo 1 klik!

Vađenje krvi

Do kraja pritisnite gumb za okidanje


Samo 1 klik za zatezanje i okidanje

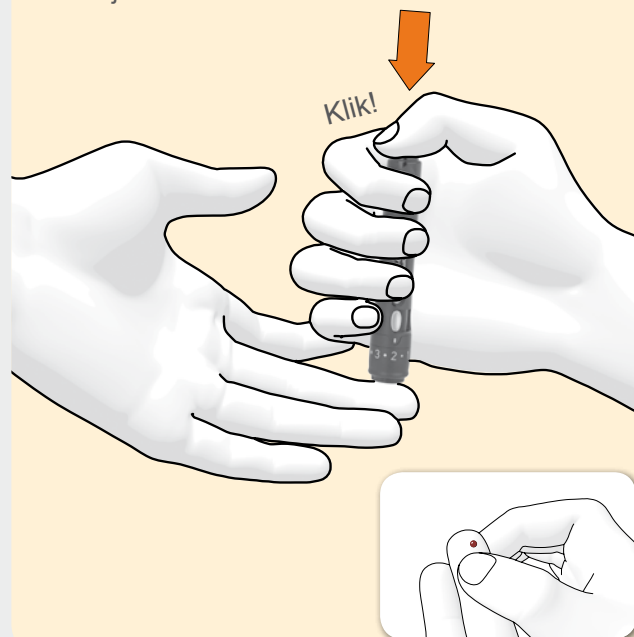

Nakon mjerenja


Priprema nove lancete

Polugu pomaknite do graničnika u smjeru A i onda natrag u smjeru B

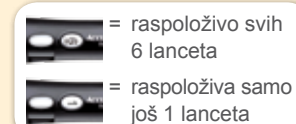

Uklanjanje iskorištenog bubnja s lancetama

Skinite poklopac i izvucite bubanj

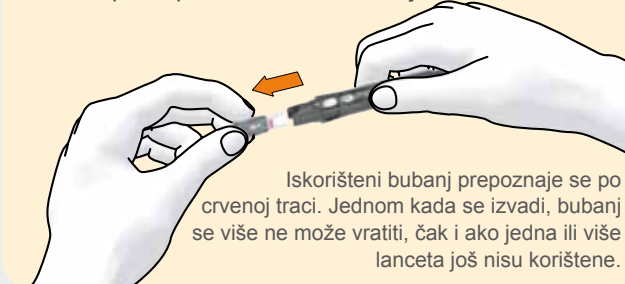

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA i FASTCLIX zaštićeni su žigovi kompanije Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Sva prava pridržana.

Želite još informacija?

Naši suradnici u Accu-Chek korisničkom servisu su Vam na raspolaganju!
Besplatni broj telefona 0800 4466800 (pon-pet, 08:00-18:00 sati).
Ili posjetite našu internetsku stranicu www.accu-chek.de



www.accu-chek.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK®