

Accu-Chek Aviva. Bezpieczeństwo dobrze się odczuwa.



Dalsze informacje o sposobie obsługi można znaleźć w filmie o produkcie na stronie www.accu-chek.de/aviva lub w ulotce informacyjnej.

Wykonywanie pomiaru glukozy we krwi



Włożenie paska testowego

Pasek testowy włożyć do glukometru w kierunku wskazanym strzałką, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Pojawia się migający symbol kropli krwi.



Pobranie krwi

Przy użyciu nakłuwacza uzyskać kroplę krwi z boku palca (skrótowa instrukcja na tylnej stronie).



Naniesienie krwi

Końcem paska testowego dotknąć kropli krwi. Nie nanosić krwi na górną część paska testowego. Gdy słyszalny będzie sygnał dźwiękowy i klepsydra zacznie migać, oznacza to, że wystarczająca ilość krwi jest wchłonięta w pasek testowy.



Odczyt wartości pomiarowej

Po 5 sekundach na wyświetlaczu pojawia się wynik pomiaru. Glukometr wyłączy się automatycznie, gdy tylko pasek testowy zostanie usunięty.

Accu-Chek FastClix. Tylko 1 kliknięcie do pobrania krwi.

Przygotowanie

Włożenie bębenka z lancetami

Ściągnąć nasadkę

Wprowadzić bębenek

Nałożyć nasadkę

Ustawienie głębokości nakłucia

Obracać nasadkę, aż na oznaczeniu będzie widoczna żądana głębokość nakłucia




Pobranie krwi: tylko 1 kliknięcie!

Pobranie krwi

Przycisk spustowy nacisnąć całkowicie do dołu

Tylko 1 kliknięcie
do naciągnięcia i wyzwolenia spustu

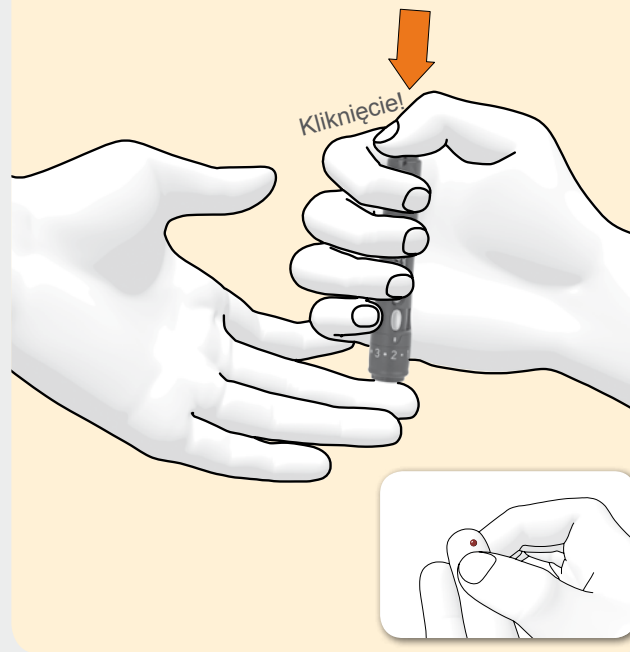

Postępowanie po pobraniu krwi


Przygotowanie nowego lancetu

Poruszyć dźwignię aż do oporu w kierunku A i z powrotem w kierunku B

= dostępne wszystkie 6 lancetów
 = dostępny już tylko 1 lancet

Usunięcie zużytego bębenka z lancetami

Ściągnąć nasadkę i wyjąć bębenek

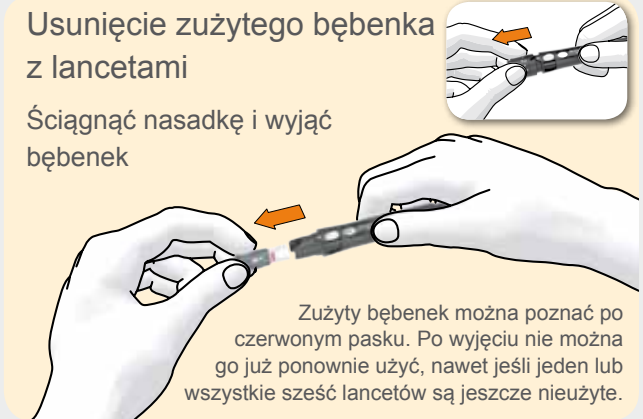

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA i FASTCLIX są znakami towarowymi firmy Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Chcą się Państwo więcej dowiedzieć?

Nasi pracownicy działu obsługi klienta Accu-Chek są do Państwa dyspozycji!
Bezpłatny telefon 0800 4466800 (pon-pt, godz. 08:00-18:00).
Lub można odwiedzić naszą stronę internetową www.accu-chek.de



www.accu-chek.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK®