

Accu-Chek Aviva. El confort de la seguridad.



Encontrará más información acerca del uso del dispositivo en el vídeo del producto: www.accu-chek.de/aviva y en el folleto incluido en la caja.

Cómo realizar una medición de glucemia



Introducir la tira reactiva

Introduzca la tira reactiva en el medidor en la dirección de la flecha hasta que escuche un pitido. Aparece el símbolo de la gota de sangre parpadeando.



Extraer sangre

Obtenga una gota de sangre pinchando con el dispositivo de punción en una de las superficies laterales de la yema del dedo (breve explicación al dorso).



Aplicar la sangre

Roce el extremo de la tira reactiva con la gota de sangre. No aplique la gota encima de la tira reactiva. Cuando el medidor emite un pitido y el reloj de arena comienza a parpadear significa que en la tira reactiva hay suficiente sangre.



Leer el resultado de la medición

Transcurridos 5 segundos aparece en la pantalla el resultado de la medición. El medidor se apagará automáticamente una vez que se retire la tira reactiva.

Accu-Chek FastClix.

Extracción de sangre con sólo 1 clic.

Preparación

Colocar un cartucho de lancetas

Quitar el capuchón

Introducir el cartucho

Colocar el capuchón

Ajustar la profundidad de penetración

Gire el capuchón hasta que en la marca aparezca la profundidad de penetración deseada




Extracción de sangre: simplemente con 1 clic.

Extraer sangre

Apriete el botón disparador completamente hacia abajo



Sólo 1 clic para tensar y disparar

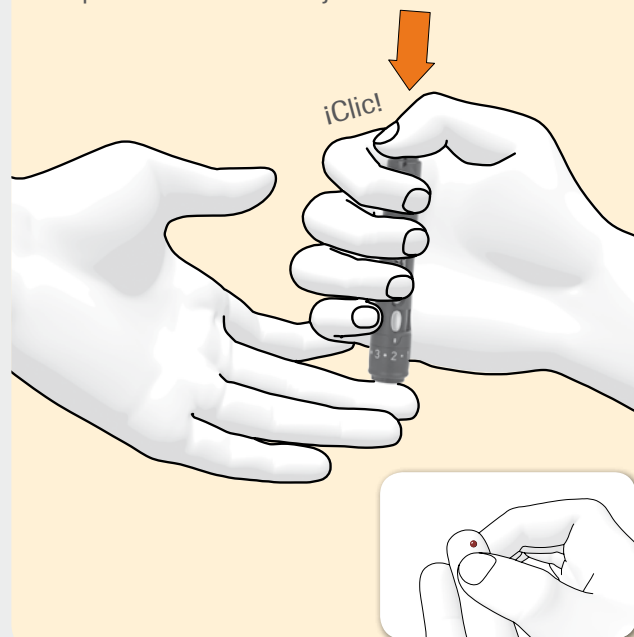

Preparación para volver a utilizarlo



Cargar una nueva lanceta

Gire el botón de resorte hasta el tope hacia A y después hacia B

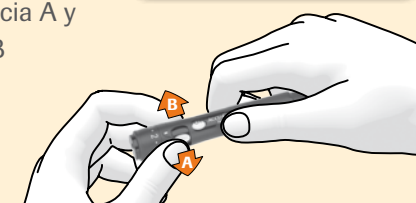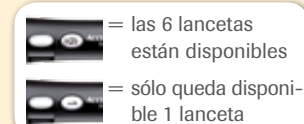

Retirar el cartucho de lancetas usado

Quite el capuchón y saque el cartucho

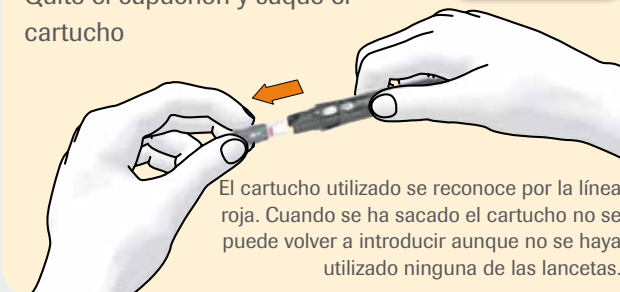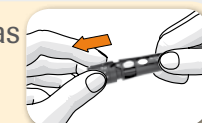

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA y FASTCLIX son marcas de Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Todos los derechos reservados.

¿Quiere saber más?

¡Nuestros empleados del Centro de Atención al Cliente de Accu-Chek están a su disposición!

Número de teléfono gratuito 0800 4466800 (Lu-Vi, 08:00-18:00 h).

O visite nuestro portal online en www.accu-chek.de



www.accu-chek.de

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK®