

Accu-Chek Aviva. Sicherheit fühlt sich gut an.



Weitere Handhabungshinweise bietet das Produktvideo unter www.accu-chek.de/aviva oder die Packungsbeilage.

Durchführen einer Blutzuckermessung



Teststreifen einführen

Führen Sie den Teststreifen in Pfeilrichtung in das Messgerät ein, bis ein Signalton ertönt. Es erscheint ein blinkendes Blutropfensymbol.



Blut entnehmen

Gewinnen Sie mit der Stechhilfe einen Blutstropfen an der Seite Ihres Fingers (Kurzanleitung rückseitig).



Blut auftragen

Berühren Sie mit dem Ende des Teststreifens den Blutstropfen. Tragen Sie das Blut nicht auf die Oberseite des Teststreifens auf. Sobald ein Signalton ertönt und die Sanduhr zu blinken beginnt, wurde genug Blut in den Teststreifen eingesogen.



Messwert ablesen

Auf dem Display erscheint nach 5 Sekunden der Messwert. Das Messgerät schaltet sich automatisch aus, sobald der Teststreifen entfernt wurde.

Accu-Chek FastClix. Nur 1 Klick zur Blutgewinnung.

Vorbereitung

Lanzetten-
trommel
einsetzen

Kappe
abziehen



Trommel
einführen




Kappe
aufsetzen



Stechtiefe einstellen

Kappe drehen, bis die gewünschte
Stechtiefe an der Markierung steht

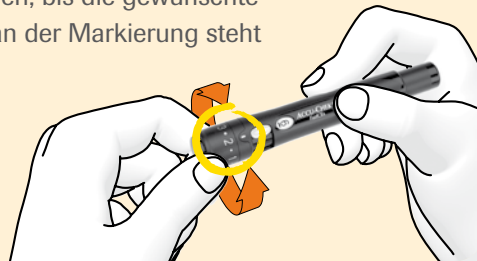


Blutgewinnung: einfach nur 1 Klick!

Blut entnehmen

Auslöseknopf vollständig
nach unten drücken



**Nur 1 Klick
zum Spannen
und Auslösen**

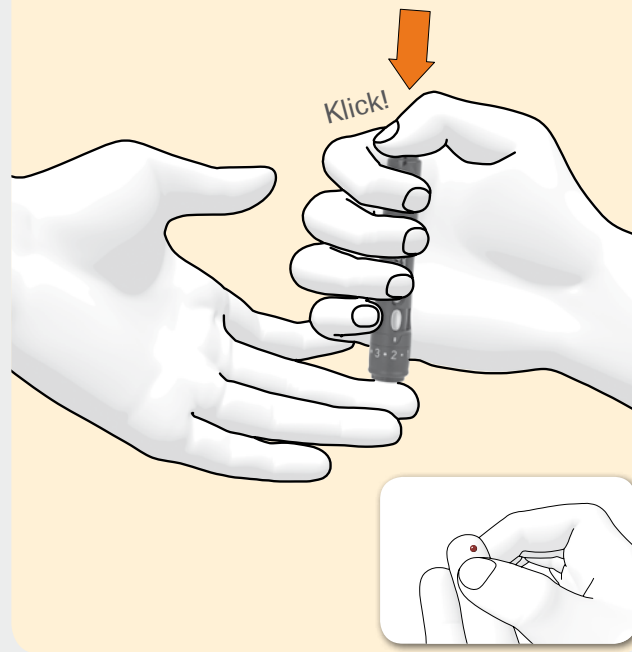

Nachbereitung



Neue Lanzette
bereitstellen

Hebel bis zum Anschlag
in Richtung A und wieder
in Richtung B bewegen

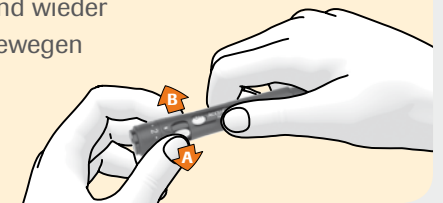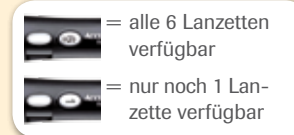

Gebrauchte Lanzetten-
trommel entfernen

Kappe abziehen und Trommel
rausziehen

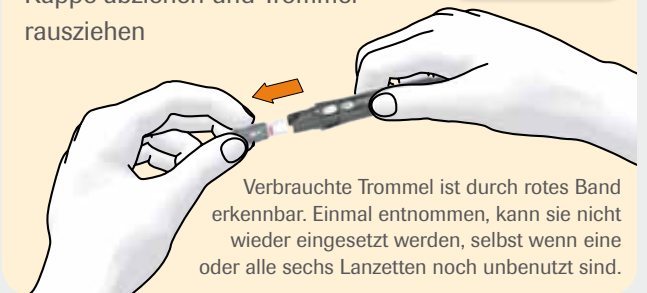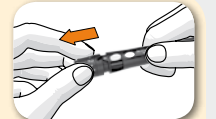

Verbrauchte Trommel ist durch rotes Band
erkennbar. Einmal entnommen, kann sie nicht
wieder eingesetzt werden, selbst wenn eine
oder alle sechs Lanzetten noch unbenutzt sind.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA und FASTCLIX sind Marken von Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Alle Rechte vorbehalten.

Sie wollen mehr erfahren?

Unsere Mitarbeiter im Accu-Chek Kunden Service Center sind für Sie da!
Kostenfreie Telefonnummer 0800 4466800 (Mo-Fr, 08:00-18:00 Uhr).
Oder besuchen Sie unser Online-Portal unter www.accu-chek.de



www.accu-chek.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK®