

Accu-Chek Aviva Nano.

صغير الحجم. كبير في الأداء.



الآن مع كود عملي دائم = جاهز للقياس على الفور!

شريحة التنشيط الإلكترونية السوداء (موحدة مع الرقم 112) توجد بالفعل في جهاز قياس السكر بالدم Accu-Chek Aviva Nano ويمكن أن تظل هناك باستمرار. الجهاز يصنع كوده بنفسه الآن تلقائياً.

مزيد من إرشادات الاستخدام تحصلون عليها من فيديو المنتج تحت العنوان
www.accu-chek.de/nano أو من نشرة العبوة.

إجراء قياس السكر بالدم



أخذ عينة الدم

احصل على قطرة دم بمساعدة أداة اللوخز من جانب الأصبع (دليل الاستخدام المختصر على ظهر الصفحة).



أدخل شريحة الاختبار

أدخل شريحة الاختبار في اتجاه السهم في جهاز القياس حتى تصدر إشارة صوتية. بعد وميض الكود لفترة قصيرة سيظهر رمز قطرة دماء ويبدأ في الوميض.



قراءة القيم المقاسة

بمجرد أن تصدر إشارة صوتية وتبدأ الساعة الرملية في الوميض. يكون قد امتصاصت شريحة الاختبار الدم بشكل كافي. بعد 5 ثواني ستظهر القيمة المقاسة على الشاشة.



وضع الدم

أسس قطرة الدم بنهاية شريحة الاختبار. لا تضع الدم على السطح العلوي لشريحة الاختبار.

Accu-Chek FastClix.


نقرة واحدة فقط للحصول على الدم.

الإعداد



أضبط عمق الوخزة

قم بتدوير الغطاء حتى يتواجد عمق الوخزة المرغوب على العلامة

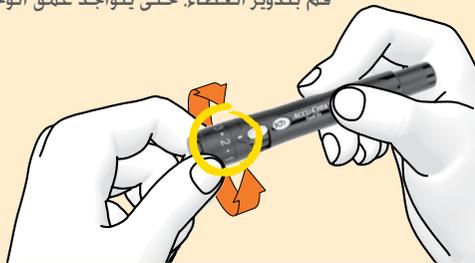


الحصول على الدم: نقرة واحدة فقط!

خذ عينة الدم

أضغط زر التحرير بالكامل إلى أسفل

نقرة واحدة فقط للتركيب والتحرير

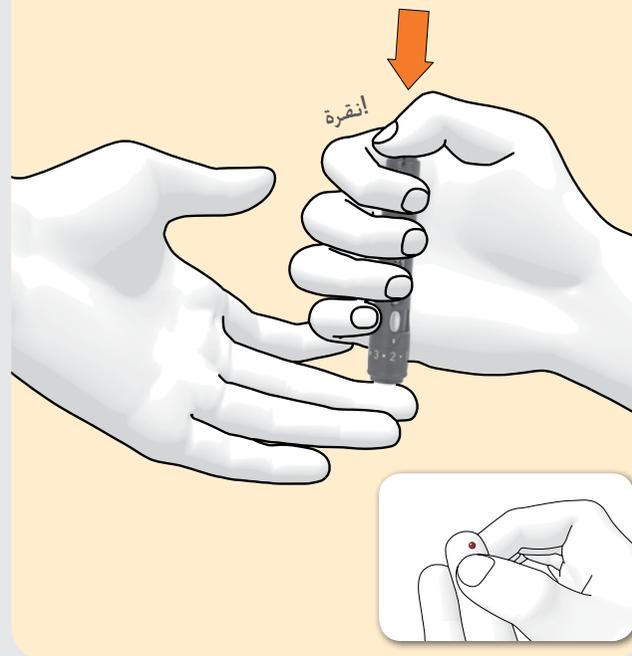

الإعداد اللاحق

ضع أداة وخز جديدة جاهزة للاستعمال

حرك الزر الرفاع حتى النهاية في اتجاه A ثم حركه مرة أخرى في اتجاه B



أزغ أسطوانة أداة الوخز المستعملة

أزغ الغطاء وأخرج الاسطوانة



شاهد. ما هو ممكن.

إن ACCU-CHEK و ACCU-CHEK AVIVA NANO و FASTCLIX علامات تجارية مملوكة لشركة Roche. حقوق الطبع محفوظة لـ Roche Diagnostics 2013 جميع الحقوق محفوظة.

هل تريد معرفة المزيد؟

العاملين لدينا في مركز خدمة عملاء Accu-Chek في خدمتكم!
هاتف مجاني 0800 4466800 (الأثنين - الجمعة، الساعة 8:00 - 18:00).
أو زوروا موقعنا على الإنترنت تحت العنوان www.accu-chek.de



www.accu-chek.de
Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK®