

ACCU-CHEK® Compact Plus

Μετρώντας την γλυκόζη του αίματός σας

Ο μετρητής Accu-Chek Compact Plus διατίθεται με τις μπαταρίες του τοποθετημένες και την ημερομηνία και ώρα ρυθμισμένες.

Ο μετρητής Accu-Chek Compact Plus θα κωδικοποιηθεί αυτόματα μόλις τοποθετηθεί ο κύλινδρος των ταινιών μέτρησης.

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση του κυλίνδρου των ταινιών μέτρησης



1 Ανοίξτε το κάλυμμα του διαμερίσματος του κυλίνδρου.



2 Πατήστε το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του κυλίνδρου.



3 Γυρίστε ανάποδα τον μετρητή. Ο κύλινδρος των ταινιών βγαίνει έξω από τον μετρητή.



4 Τοποθετήστε ένα νέο κύλινδρο ταινιών μέτρησης.


Εκτέλεση μετρήσεων γλυκόζης αίματος



1 Τραβήξτε προς τα κάτω το μεσαίο κουμπί και θα βγει από το μετρητή μια ταινία μέτρησης.



2 Κρατήστε τον μετρητή έτσι ώστε, η ταινία να έχει κατεύθυνση προς τα κάτω. Ακουμπήστε τη σταγόνα του αίματος στην άκρη της ταινίας, εκεί όπου βρίσκεται η μαύρη εγκοπή. Η ταινία θα αναρροφήσει το αίμα.

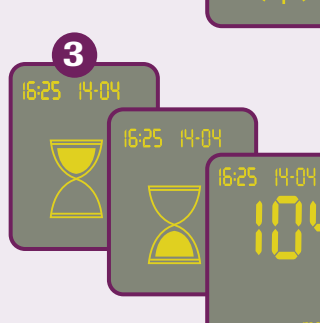

3 Παρακολουθήστε στην οθόνη την εξέλιξη της μέτρησης μέχρι να βγει το αποτέλεσμα.



4 Κρατώντας τον μετρητή όρθιο, τραβήξτε προς τα κάτω το μεσαίο κουμπί και η ταινία μέτρησης θα βγει αυτόματα από τον μετρητή.

ACCU-CHEK® Softclix Plus

Μπορείτε να αποσυνδέσετε το στυλό τρυπήματος Accu-Chek Softclix Plus από τον μετρητή σακχάρου Accu-Chek Compact Plus χρησιμοποιώντας το κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μετρητή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το στυλό προσαρτημένο επάνω στον μετρητή.



1 Βγάλτε το καπάκι από το στυλό τρυπήματος.



5 Τοποθετήστε ξανά το καπάκι, στο στυλό τρυπήματος. Πιέστε το για να μπει καλά στη θέση του, μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ».



2 Πατήστε το έμβολο του στυλό τρυπήματος για να βγάλετε και να πετάξετε τη χρησιμοποιημένη αιχμή τρυπήματος.



6 Περιστρέψτε το καπάκι για να επιλέξετε το επιθυμητό βάθος τρυπήματος (συνολικά 11 βαθμίδες τρυπήματος).



3 Τοποθετήστε μια καινούργια αιχμή τρυπήματος στην αντίστοιχη υποδοχή και πιέστε την μέχρι να μπει καλά στη θέση της μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ».



7 Πατήστε το έμβολο μέχρι το τέρμα της διαδρομής του. Το στυλό τρυπήματος είναι τώρα οπλισμένο.



4 Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της αιχμής τρυπήματος με μικρές κυκλικές κινήσεις.



8 Πιέστε το στυλό τρυπήματος επάνω στο σημείο που επιλέξατε για λήψη δείγματος αίματος και πατήστε πάλι το έμβολο του στυλό τρυπήματος μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ». Μετά απομακρύνετε το στυλό τρυπήματος από το σημείο λήψης για να πάρετε το δείγμα αίματος.

Το στυλό τρυπήματος Accu-Chek Softclix Plus προορίζεται για χρήση από ένα άτομο και μόνο. Εάν το στυλό σας χρησιμοποιείται και από άλλο άτομο, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης λοιμώξεων.

Οι σύντομες αυτές οδηγίες χρήσης δεν αντικαθιστούν τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης του μετρητή γλυκόζης αίματος Accu-Chek Compact Plus. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις σχετικές με την ασφάλεια σημειώσεις στις αναλυτικές οδηγίες χρήσης.

ACCU-CHEK, SOFTCLIX and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.
© 2007 Roche Diagnostics

www.accu-check.com
Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim



ACCU-CHEK®

Live life. The way you want.