


Accu-Chek Guide делает жизнь проще.



Дополнительные указания по обращению содержатся в видеоматериалах к изделию на сайте www.accu-chek.de/guide или во вкладыше-инструкции.

Порядок измерения уровня сахара в крови

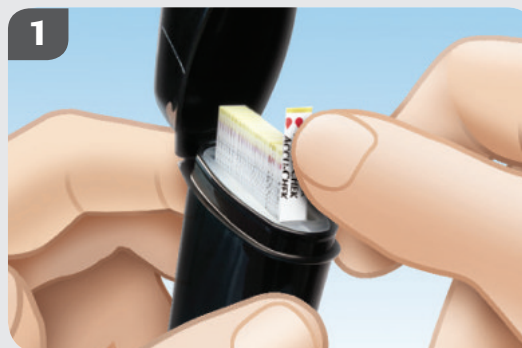

1 Извлечь тест-полоску

Выдвиньте тест-полоску спереди или сзади, слегка нажимая сверху. Вы можете прикоснуться к верхней части этой тест-полоски.



2 Ввести тест-полоску

Введите тест-полоску в специальную прорезь в направлении стрелки. Если предварительно включить прибор, автоматически активируется подсветка.



3 Нанести кровь

Слегка коснитесь края капли жёлтым краем тест-полоски и дождитесь, пока появится сообщение „Выполняется измерение“.



4 Удалить тест-полоску

Нажмите на кнопку выброса или вытяните тест-полоску, чтобы удалить её.

Accu-Chek FastClix. Получение капли крови одним нажатием.

Подготовка

Установка барабана с ланцетами



1. Снимите колпачок

2. Вставьте барабан

3. наденьте колпачок



Поверните колпачок так, чтобы отметка указывала нужную глубину прокалывания.

Получение капли крови

Всего 1 нажатие!

Всего 1 нажатие для взвода и прокалывания



Нажмите на спусковую кнопку до упора, чтобы получить каплю крови.

После использования

Обработка и удаление барабана с ланцетами



1. Передвиньте рычаг до упора вниз и затем снова вверх.

2. При удалении снимите колпачок и извлеките барабан.

Неиспользованный барабан



Использованный барабан



Внимание! Не удаляйте барабан, пока не будут израсходованы все ланцеты. В целях поддержания гигиены барабан нельзя установить назад после извлечения.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE и FASTCLIX являются торговыми марками компании Roche.
© 2018 Roche Diabetes Care. Все права защищены.



www.accu-chek.de

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

Хотите узнать больше?

Наши сотрудники в Центре обслуживания клиентов Accu-Chek помогут Вам!

Бесплатный телефон 0800 4466800 (пн-пт, 08:00–18:00).

Также Вы можете зайти на наш интернет-портал по адресу www.accu-chek.de

ACCU-CHEK®