


ACCU-CHEK® MOBILE

измеряйте свой сахар в крови в любое время и в любом месте.


4 ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ



1
Открыть
Откройте предохранитель.
Глюкометр включается после этого автоматически.

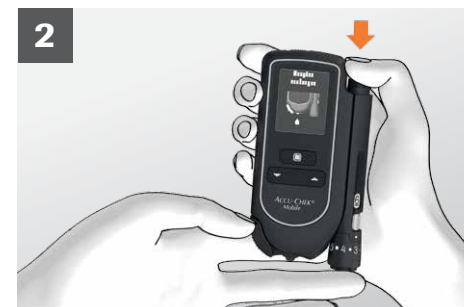

2
Взять кровь
Плотно прижмите прокалыватель к кончику пальца сбоку. Затем нажмите на кнопку спуска до упора: всего одним нажатием производится и взвод и спуск.

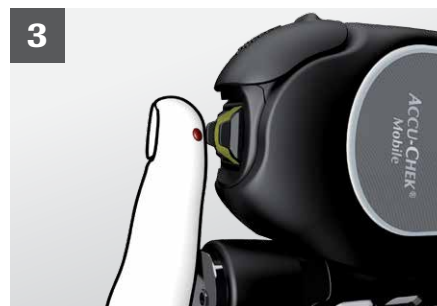

3
Измерить
Нанесите каплю крови на центр поля теста.
При этом лишь слегка прикасайтесь к полю.



4
Закрывать
Примерно через 5 секунд можно считать результат. При закрытии предохранителя глюкометр выключается.



Тест-кассета с
50 тестами

Барaban с 6
стерильными ланцетами

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ / ЗАМЕНА ТЕСТ-КАССЕТЫ (1-3)



1
Полностью откройте предохранитель до упора. Только так можно открыть отсек для кассеты и уложить тест-кассету.



2
Передвиньте вверх кнопку деблокировки крышки отсека.



3
Вставьте новую тест-кассету в глюкометр. Закройте крышку отсека и предохранитель.



4
Удалите защитную плёнку с батареек, потянув за неё назад из глюкометра. Снимите защитную плёнку с дисплея.

ПОДГОТОВКА ЛАНЦЕТА



1
Подготовьте прокалыватель к следующему забору крови: передвиньте рычажок в направлении ① и обратно в направлении ②.



2
Поворачивайте колпачок, пока отметка не укажет на нужную глубину прокола. Начните со средней глубины прокола, напр., 3.



3
Снимайте барабан только после использования всех 6 ланцетов.



После снятия барабан нельзя установить повторно. Использованный барабан можно определить по красной полоске.

ЗАМЕНА БАРАБАНА С ЛАНЦЕТАМИ



1
Снимите колпачок с прокалывателя.



2
Удалите барабан с ланцетами.



3
Установите новый барабан (белым концом вперёд). Теперь в вашем распоряжении 6 стерильных ланцетов.



4
Установите колпачок на место.



www.accu-check.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE и FASTCLIX являются торговыми марками компании Roche.
© 2019 Roche Diabetes Care. Все права защищены.