


ACCU-CHEK® MOBILE

MIDA SU GLUCEMIA CUÁNDO Y DÓNDE USTED QUIERA.

MEDICIONES EN 4 SENCILLOS PASOS



1
Abrir
Abra la protección de la punta.
El glucómetro se enciende.

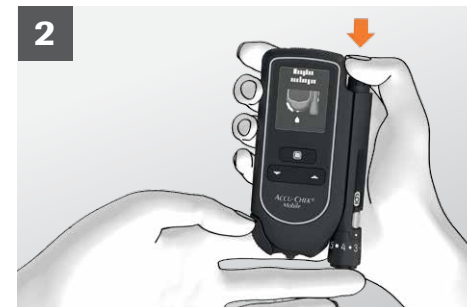

2
Extraer sangre
Presione firmemente el dispositivo de punción sobre una de las superficies laterales de la yema del dedo. A continuación, apriete el botón disparador completamente hacia abajo: un solo clic para tensar y disparar.



3
Medir
Aplique la gota de sangre en el centro de la superficie para el análisis. Para ello sólo debe rozar suavemente la superficie.



4
Cerrar
Puede leer el resultado transcurridos aproximadamente 5 seg. El glucómetro se apaga al cerrar la protección de la punta.



Casete de pruebas con 50 pruebas

Cartucho de lancetas con 6 lancetas estériles


PUESTA EN FUNCIONAMIENTO / CAMBIO DEL CASETE DE PRUEBAS (1-3)



1 Abra la protección de la punta por completo hasta el tope. Sólo así podrá abrir el compartimento del casete y colocar en él el casete de pruebas.



2 Deslice hacia arriba el botón de desbloqueo de la tapa del compartimento del casete.

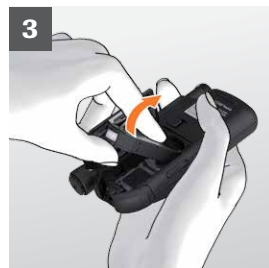

3 Coloque un casete de pruebas nuevo en el glucómetro. Cierre la tapa del compartimento y la protección de la punta.



4 Tire de la lámina protectora de las baterías hacia atrás para sacarla del glucómetro. Desprenda la lámina protectora de la pantalla.

PREPARACIÓN DE UNA LANCETA



1 Prepare el dispositivo de punción para la siguiente extracción de sangre: mueva la palanca en dirección ① y después de nuevo hacia atrás en dirección ②.



2 Gire el capuchón hasta que aparezca la profundidad de penetración deseada en la marca. Comience con una marca de penetración media, p. ej. 3.



3 Retire el cartucho de lancetas sólo cuando haya usado las 6 lancetas.



Una vez sacado, el cartucho de lancetas no se puede volver a colocar. El cartucho de lancetas usado se reconoce por la línea roja.

CAMBIO DEL CARTUCHO DE LANCETAS



1 Quite el capuchón del dispositivo de punción.



2 Saque el cartucho de lancetas.



3 Introduzca un nuevo cartucho de lancetas (el extremo blanco primero). Ahora tiene disponibles 6 lancetas estériles.



4 Coloque de nuevo el capuchón.



www.accu-check.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE y FASTCLIX son marcas de Roche.
© 2019 Roche Diabetes Care. Todos los derechos reservados.