


Accu-Chek rende tutto più semplice!



Per le istruzioni d'uso dettagliate vedere il video del prodotto nel sito www.accu-chek.de/guide oppure consultare il foglietto illustrativo.

Come si misura la glicemia

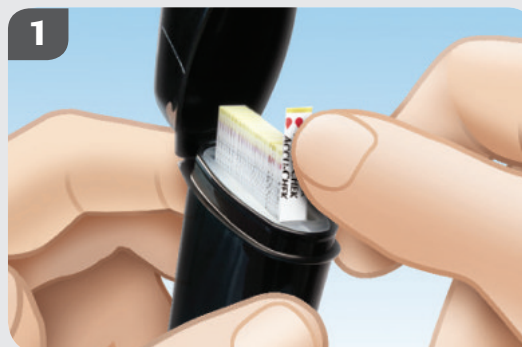

Estrazione della striscia reattiva

Con una leggera pressione, spingere verso l'alto una striscia reattiva dalla parte anteriore o posteriore. È possibile toccare anche il lato superiore di questa striscia reattiva.



Applicazione del sangue

Toccare il margine giallo della striscia reattiva con la goccia di sangue e attendere che compaia il messaggio "Misurazione in corso".



Inserimento della striscia reattiva

Inserire la striscia reattiva nella rispettiva guida nel senso indicato dalla freccia. Se lo strumento è spento, si accenderà automaticamente.



Espulsione della striscia reattiva

Rimuovere la striscia reattiva premendo il pulsante di espulsione della striscia reattiva oppure estraendola direttamente.

ACCU-CHEK®

Accu-Chek FastClix. Basta 1 clic e il prelievo è fatto!

Procedura preliminare

Inserimento del caricatore di lancette



1. Staccare il cappuccio

2. Inserire il caricatore

3. Applicare il cappuccio



Ruotare il cappuccio fino a raggiungere la profondità di puntura desiderata, indicata sulla scala.

Prelievo di sangue

Basta 1 solo clic!

1 solo clic
per caricare
e attivare



Premere completamente verso il basso il pulsante di attivazione per eseguire il prelievo di sangue.

Procedura finale

Preparazione e rimozione del caricatore di lancette



1. Spostare la levetta fino all'arresto, prima verso il basso, poi di nuovo verso l'alto.

2. Staccare il cappuccio e poi estrarre il caricatore.

Caricatore non utilizzato



Caricatore utilizzato



Attenzione: Non rimuovere il caricatore di lancette se non sono state utilizzate tutte le lancette. Per motivi igienici, non reinserire il caricatore di lancette dopo averlo rimosso.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE e FASTCLIX sono marchi di Roche.
© 2018 Roche Diabetes Care. Tutti i diritti riservati.

Desidera maggiori informazioni?

I nostri collaboratori del Servizio Assistenza Clienti Accu-Chek sono a Sua disposizione!

Numero di telefono gratuito 0800 4466800 (Lu-Ve, ore 08:00-18:00).

Oppure visiti il nostro portale online all'indirizzo www.accu-chek.de



www.accu-chek.de

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK®